

TARJETA DE GARANTÍA

NOMBRE : _____

APELLIDO: _____

DIRECCIÓN 1: _____

DIRECCIÓN 2: _____

CIUDAD: _____

ESTADO: _____ CÓDIGO POSTAL: _____

TELÉFONO (DÍA): _____

(NOCHE): _____

CORREO ELECTRÓNICO: _____

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

FECHA DE COMPRA: _____

FACTURA/ORDEN DE COMPRA: _____

¿CÓMO TOMÓ CONOCIMIENTO DE DDS?

CORREO AL CENTRO DE SERVICIO:

DDS Inc.


21 Shafer Pl

Hackensack, NJ 07601



OA Pro™

MANUAL DE USUARIO

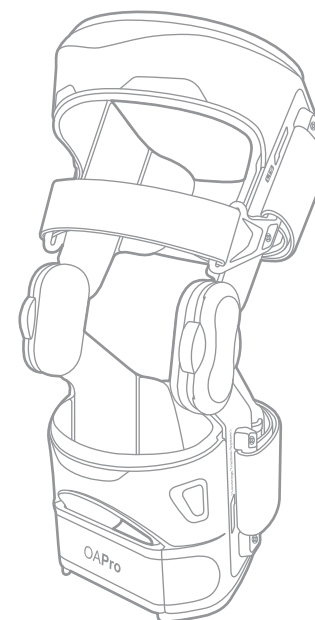

Rodillera bicompartimental para descompresión OA

Lea el manual por completo antes de utilizar su aparato ortopédico.

Descripción y descripción general del producto

- Descripción del producto: Rodillera de descompresión OA bicompartimental
- Nombre del producto: OA Pro™
- Declaración de fabricación No.: 18-931
- Uso de rendimiento: consulte el manual del usuario
- Precauciones de uso: Ver Manual del Usuario
- Peso del producto: S 356 g, M 378 g, L 400 g
- Unidad(es) de embalaje: 1 juego
- Descripción del producto: El OA Pro™ es un dispositivo médico que ha sido diseñado para el tratamiento de la osteoartritis (OA). Como tratamiento no invasivo (no quirúrgico), esta rodillera de descarga alivia el dolor de la osteoartritis y brinda asistencia a quienes están con artritis de rodilla.

Precauciones de seguridad

Para garantizar un uso seguro y adecuado de su unidad de refuerzo, lea los siguientes pasos con cuidado.

- a. Lea detenidamente su manual de usuario antes de usar su unidad. Después de leer, siempre guarde el manual en un lugar seguro para facilitar su seguimiento y consulta.
- b. Siempre consulte a su médico antes de considerar el uso de nuestro aparato ortopédico, especialmente si se ha sometido a algún tipo de cirugía o procedimiento reciente.
- c. Se recomienda no usar aparatos ortopédicos en ambas rodillas al mismo tiempo, ya que esto puede provocar la interrupción de su caminata natural y crear una posibilidad de lesiones personales.
- d. No intente desmontar ni modificar su unidad, ya que esto puede causar un mal funcionamiento.
- e. Comuníquese con su médico de inmediato si siente alguna molestia, dolor o hinchazón, y/o mala circulación sanguínea. Esto es especialmente importante para pacientes con enfermedad vascular periférica, neuropatía y/o piel sensible.
- f. Utilice el OA Pro™ únicamente para el uso previsto y no lo utilice de una manera que plantee riesgo de dañar la unidad o causar posibles lesiones.

Estructura y piezas del producto

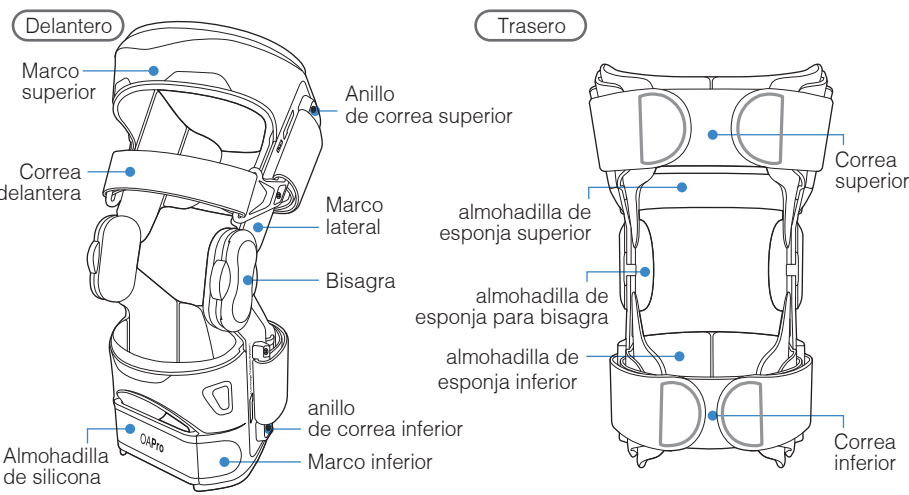


Tabla de tallas [Mida la circunferencia de las áreas especificadas]






TAMAÑO	Hermético [6" por encima del centro de la rodilla]	Centro de la rodilla	Becerro [6" debajo del centro de la rodilla]
Pequeño	15.5" – 18.5"	12.0" – 14.0"	12.0" – 14.0"
Medio	18.5" – 21.0"	14.0" – 15.0"	14.0" – 16.0"
Grande	21.0" – 23.5"	15.0" – 17.0"	16.0" – 18.0"
Extra Grande	23.5" – 26.5"	17.0" – 19.0"	18.0" – 20.0"

Comprobar antes de usar

- a. Asegúrese de que cada parte del aparato ortopédico esté intacta y correctamente colocada, según la ilustración de estructura y piezas del producto.
- b. Si hay alguna materia extraña o sustancia en la bisagra interior, puede interferir con el funcionamiento de su aparato ortopédico. Asegúrese de despejar esta área y mantenerla limpia durante el uso.
- c. Verifique dos veces para asegurarse de que su aparato ortopédico esté en la posición correcta y no esté al revés. Hacia abajo o al revés antes de la aplicación.

Cómo usar su aparato ortopédico

- a. Siéntese en el borde de una silla estable y estire la pierna para estirar la rodilla.
Lugar el aparato ortopédico en la rodilla. Centre la bisagra con la mitad de la rodilla.
Es muy importante que la rodilla esté alineada con precisión con la bisagra.

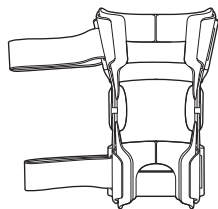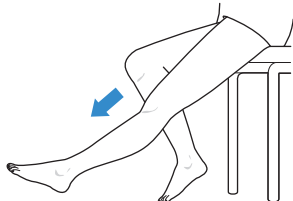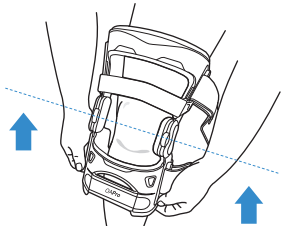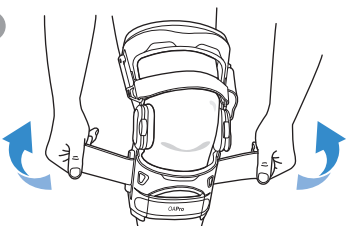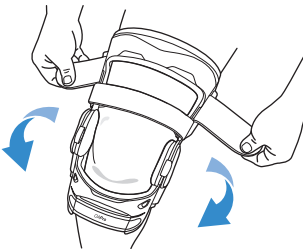	
Antes de usar su aparato ortopédico, abra la parte superior y correas inferiores en un lado.	Siéntate en una silla estable y extiende la pierna hacia adelante para colocar el aparato ortopédico.
	
Después de colocar la bisagra en la centro de la rodilla, colóquese el aparato ortopédico con tu pierna ligeramente doblada.	Sujete firmemente las correas y el velcro, mientras tira con igual fuerza en ambos extremos.
 Sujete firmemente las correas superiores y el velcro, manteniendo la rodilla en un ángulo de 90°, mientras tira con la misma fuerza en ambos extremos.	


* Después de asegurar las correas inferiores, asegúrese de doblar la rodilla en un ángulo de 90° antes de asegurar las correas superiores. Consulte la ilustración de arriba para activar la función de descompresión de su aparato ortopédico.

Sistema de bloqueo de ángulo


El sistema Angle Lock controla el ángulo y el rango de movimiento con respecto a la extensión y flexión de la rodilla combinando varios toques de ángulo EXT y FLEX. Cada tope angular ha sido creado para limitar el rango de movimiento en incrementos de ángulo de 25 grados.

Método de instalación

- a. Consulte a su médico antes de intentar ajustar la cantidad de extensión y flexión de su **aparato ortopédico**.
- b. Los ajustes para enderezar/extender la rodilla requerirán inserciones "EXT", mientras que controlar el grado de flexión de la rodilla requiere inserciones en ángulo "FLEX".
- c. Asegúrese de verificar que tenga los toques de ángulo correctos, con inserciones "EXT" y "FLEX" del mismo grado para ambas bisagras, antes de instalar.
- d. Como se muestra en la siguiente ilustración, el tope angular correspondiente está ubicado en la parte posterior de ambas bisagras. Se puede acceder a ellos y cambiarlos fácilmente con un destornillador.

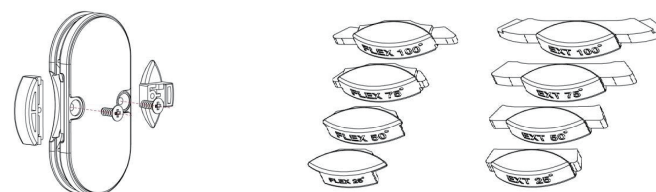

- El rango de ángulo total debe ser igual a 100°, con un ángulo máximo de 50° tanto en la parte superior como en la inferior de la abrazadera. Esto se puede lograr combinando individualmente los insertos EXT y FLEX en su bisagra, para garantizar un rango de movimiento máximo de 100°, como se ve en la siguiente ilustración.

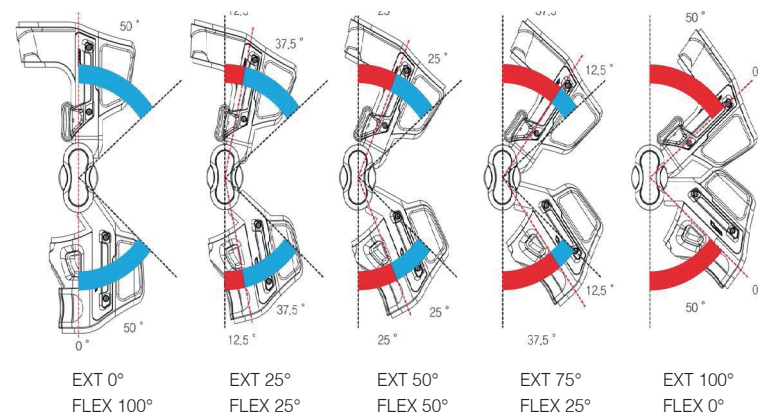

Instrucciones de mantenimiento/almacenamiento

Cuidado de limpieza

- a. Retire todo el acolchado de esponja y las correas de velcro del marco antes de lavarlo.
- b. Una vez que haya retirado todo el acolchado y las correas del marco principal de su aparato ortopédico, limpie suavemente el marco con un paño húmedo. Después de la limpieza, deje que el marco se seque completamente a la sombra antes del próximo uso.
- c. Recomendamos lavar el acolchado de esponja a mano, utilizando un detergente neutro, en agua tibia por debajo de 30°C. No lo deje en agua por un período prolongado de tiempo.



NO
PLANCHAR



NO USA
BLANQUEADOR






NO LAVAR
EN SECO



NO
EXPRIMIR

Instrucción de almacenamiento

- a. Después de limpiar su aparato ortopédico y todos los componentes, vuelva a ensamblar la unidad para guardarla hasta su próximo uso. Asegúrese de que todo el acolchado de esponja y las correas estén completamente secos antes de volver a ensamblar.

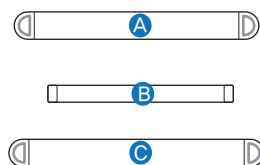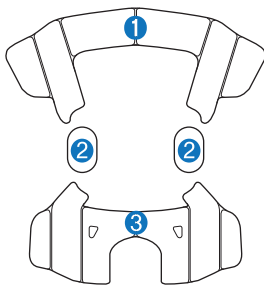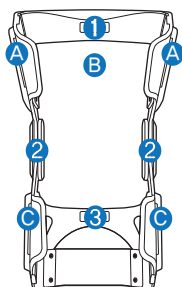

- b. Mantenga su unidad en un área bien ventilada, alejada de la luz solar directa o del calor y libre de humedad.
- c. No doble ni doble ninguna parte del aparato ortopédico innecesariamente para evitar daños o deformaciones.
- d. Si no va a volver a usar su aparato ortopédico durante un período prolongado, guárdelo dentro de un recipiente y conserve en lugar fresco y seco.

Cómo usar el producto

[Limitado - 1 año]

DDS, Inc. se enorgullece de la calidad de la construcción y fabricación de nuestros productos. Todo Los productos se someten a estrictos procesos de inspección y control de calidad para garantizar el mejor producto para nuestros clientes. Sin embargo ofrecemos una garantía de 1 año. en nuestros productos en caso de un defecto en nuestra mano de obra o materiales.

DDS, Inc. reparará o reemplazará la unidad sin cargo por un período de 1 año, a partir de fecha de compra original. Para calificar para esta garantía, debe asegurarse de enviar su tarjeta de garantía completa al momento de la compra. También necesitaremos prueba de compra por usted mismo o donde compro el producto.

Debe comunicarse con nuestro personal antes de enviar su producto, para obtener una **RMA # (Autorización de devolución del comerciante)**. Una vez que recibamos su unidad, realizaremos una evaluación de **calidad**. Inspección de toda la abrazadera para determinar la causa del mal funcionamiento. Si podemos reparar su aparato ortopédico, lo haremos sin cargo y le enviaremos su unidad de regreso. En caso de que nuestros expertos no puedan solucionar el problema, le enviaremos una nueva unidad de reemplazo.

Esta garantía no se aplica a ningún mal uso y/o mal manejo deliberado de nuestros productos. Cualquier obligación o responsabilidad implícita de garantía, incluida, entre otras, la integridad estructural del aparato ortopédico, el funcionamiento y la mecánica adecuados y/o la calidad de la construcción calificarán bajo la garantía de 1 año. Los gastos de envío de devolución y el método elegido serán responsabilidad exclusiva del cliente. Se recomienda encarecidamente el envío mediante un método rastreable, ya que DDS, Inc. no será responsable de ninguna mercancía perdida o irre recuperable a través del servicio de mensajería elegido.

Por favor contacte nuestras oficinas al orders@ddsmed.com o por teléfono al 888-495-7440, para obtener su **RMA #** y con cualquier consulta que puedas tener. También puede encontrar más información en nuestro sitio web en www.ddsmed.com.